

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

ООО «ВИТАФОН» 198097, г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, 23

Телефоны: +7 921 9637637, 8 812 7472630, бесплатный телефон по России 8 800 100 1945

e-mail: < sale@vitafon-market.ru >

www.vitafon.ru

www.vitafon-market.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект манжет фиксирующих «Многофункциональный» изготовлен в соответствии с действующей технической документацией (ТО 8157-002-33159359-2007) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____	Дата продажи _____
	Штамп предприятия торговли
Штамп ОТК	
	Подпись

В. 11-2019


КОМПЛЕКТ МАНЖЕТ ФИКСИРУЮЩИХ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ «ВИТАФОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект манжет предназначен для индивидуального использования и может применяться для фиксации виброфонов аппаратов серии «Витафон» на туловище и конечностях взрослых и детей. Комплект манжет подойдет для фиксации преобразователей на руках, ногах, а также над такими точками, как М4, М3, М2, М1 (со стороны живота), К, F, Е3, Е4 (со стороны спины). Манжеты надеваются непосредственно на тело.

Комплект состоит из длинного, среднего и двух малых ремней и 4 съемных кармашков для виброфонов (рис. 1)

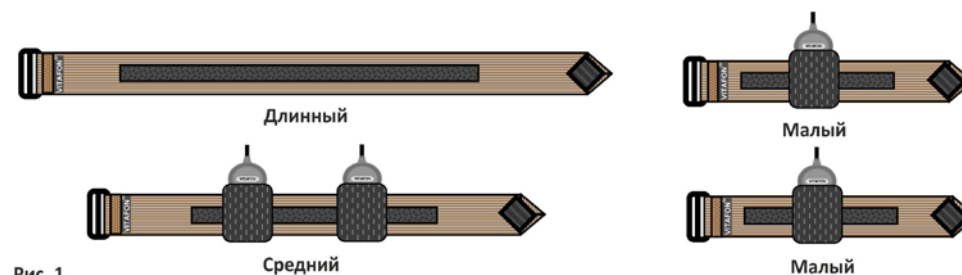

Ремни можно последовательно соединять между собой (рис. 2) для получения нужного обхвата. Кармашки надеваются на ремень и перемещаются по нему. Положение кармашков

выбирают так, чтобы виброфоны оказались в нужном месте конечности или на теле и не мешали зафиксировать манжету.

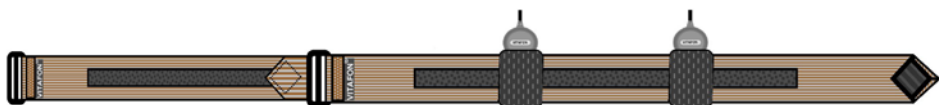


Рис. 2

Для использования манжет замерьте обхват в сантиметрах в том месте конечности или тела, где необходимо зафиксировать виброфоны. По таблице ниже определите вид и количество ремней. Соедините ремни, если их требуется больше одного. Расположите ремни перед собой липучками вверх. Если ремни разной длины, короткий ремень расположите слева, а длинный - справа. Соедините ремни.

На более длинный ремень наденьте 1, 2 или 4 кармашка, при этом черная сторона кармашка должна оказаться на стороне липучки и бирки «VITAFON» (при наличии). Если ремни - одинаковые, то кармашки можно расположить на любом из них. Кармашки для удобства можно расположить и на разных ремнях. Это зависит от конкретной области и индивидуальных размеров.

Обхват, см	Вид							
	18-30	30-42	42-48	48-68	68-92	92-108	108-132	132-160
Малый			+		+			+
Малый	+		+				+	+
Средний		+				+	+	+
Длинный				+	+	+	+	+

Вставьте виброфоны так, чтобы мембрана виброфона оказалась в контакте с синей тканью кармашка. Зафиксируйте манжету на теле таким же способом, как соединяются ремни между собой. Обеспечьте легкое натяжение ремня для хорошего прилегания виброфонов к телу.

Уход за изделием:

- стирать при температуре не более 40°C;
- ручная стирка;
- сушить на горизонтальной поверхности;
- не использовать отбеливатель;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- не гладить утюгом;
- не выкручивать;
- **запрещена эксплуатация влажного изделия.**



Гарантийные обязательства:

- гарантийный срок хранения изделия 2 года со дня выпуска;
- замена или возврат изделия осуществляется в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

При покупке изделия требуйте:

- проверки его комплектности и целостности;
- наличия в свидетельстве о приемке и продаже штампа продавца и даты продажи.

В комплект поставки входят:

Комплект манжет 1 шт.
 Руководство по эксплуатации 1 шт.
 Потребительская тара 1 шт.