

МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ «КОМБИНИРОВАННАЯ» (УРОЛОГИЧЕСКАЯ)

ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ «ВИТАФОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манжета предназначена для индивидуального использования и применяется для фиксации на теле виброфонов аппаратов серии «Витафон». Манжета надевается на тело под одежду или поверх одежды из легких тканей.

Манжета поставляется в собранном виде. Манжета состоит из трех фиксирующих частей, которые перемещаются по эластичным ремням. Фиксирующие части имеют кармашки для виброфонов.

Для использования манжеты следует:

1. В соответствии с выбранными областями воздействия вложить виброфоны в кармашки, указанные на рис. 1. Области выбираются в соответствии с методиками фонирования для соответствующего заболевания.

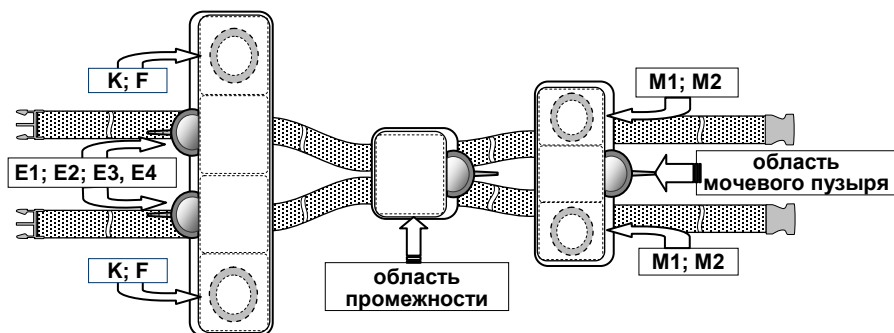


Рис. 1. Выбор карманов для виброфонов.

2. Надеть манжету, как показано на рис. 2. Фиксирующий элемент с четырьмя (4) карманами должен оказаться на спине, одиночный карман в области промежности, а элемент с тремя (3) карманами – спереди. Длина ремней регулируется с учетом роста человека.

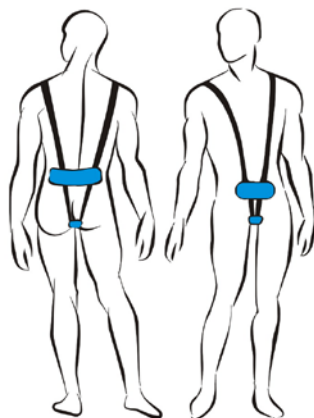


Рис. 2. Манжета на человеке

3. Далее, фиксирующие части необходимо переместить по ремням так, чтобы виброфоны оказались над выбранными областями.

4. Процедуры проводятся в положении лежа на спине, чтобы обеспечивалось достаточное прижатие виброфонов. Виброфоны, расположенные в области мочевого пузыря (или живота), желательно дополнительно зафиксировать ладонью. Во время процедуры во всех областях воздействия должна ощущаться легкая вибрация.

Уход за изделием:

- стирать при температуре не более 40°C;
- ручная стирка;
- сушить на горизонтальной поверхности;
- не использовать отбеливатель;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- не гладить утюгом;
- не выкручивать;
- **запрещена эксплуатация влажного изделия.**

Гарантийные обязательства:

- гарантийный срок использования 6 месяцев со дня продажи;
- срок службы не менее 1 года.

При покупке изделия требуйте:

- проверки его комплектности и целостности;
- наличия в свидетельстве о приемке и продаже штампа продавца и даты продажи.

Комплект поставки

Манжета фиксирующая	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара с цветным вкладышем	1 шт.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

ООО «ВИТАФОН»

198097, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, 23

Телефоны: 8-800-100-19-45 (звонок по России бесплатный)

e-mail:<info@vitafon.ru>

www.vitafon.ru

www.vsegdazdorov.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Манжета фиксирующая комбинированная изготовлена в соответствии с действующей технической документацией (ТО 8157-002-33159359) и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____	Дата продажи _____
	Штамп предприятия торговли
Штамп ОТК	Подпись