

МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ «ДЛЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА»

ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ «ВИТАФОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манжета предназначена для индивидуального использования и применяется для фиксации на теле виброфонов аппаратов «Витафон-2» и «Витафон-5». Манжета одевается непосредственно на тело.

В комплект поставки входят:

Манжета фиксирующая	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара	1 шт.

Гарантийные обязательства:


- гарантийный срок использования 6 месяцев со дня продажи;
- срок службы не менее 1 года.

Манжета предназначена для установки виброфонов на область коленного сустава (обхват от 35 до 54 см).

Манжета состоит из ремня, длина которого легко регулируется с помощью двух рамок, и четырех кармашков для преобразователей. Кармашки легко перемещаются вдоль ремня.

Для использования манжеты следует:

1. Вложить виброфоны в кармашки. Кармашки расположить в соответствии с выбранными областями воздействия.
2. Зафиксировать манжету на колене так, чтобы виброфоны оказались над выбранными областями.

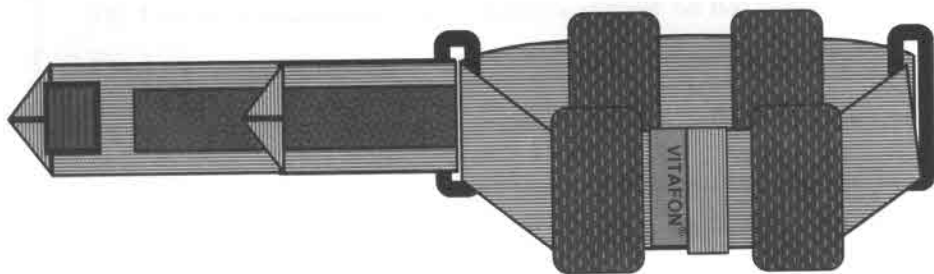

Габаритные размеры манжеты, мм:

Ширина ремней манжеты, мм	50
Длина манжеты, мм, в пределах	от 560 до 660
Масса нетто манжеты, кг, не более	0,1

Уход за изделием:

- стирать при температуре не более 40°C;
- ручная стирка;
- сушить на горизонтальной поверхности;
- не использовать отбеливатель;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- не гладить утюгом;
- не выкручивать;
- запрещена эксплуатация влажного изделия.

При покупке изделия требуйте:

- проверки его комплектности и целостности;
- наличия в свидетельстве о приемке и продаже штампа продавца и даты продажи.