

МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ «ПЛЕЧЕВАЯ»

ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ «ВИТАФОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манжета предназначена для индивидуального использования и применяется для фиксации виброфонов (преобразователей аппаратов «Витафон») на плече. Манжета надевается на тело под одежду или поверх одежды из тонких тканей.

Манжета плечевая (рис. 1) состоит из:

- сдвоенного несущего ремня (поз. 1);
- 4-х карманов для виброфонов (поз. 2);
- большого регулируемого эластичного ремня (поз. 3), фиксирующего положение манжеты через плечо;
- малого регулируемого ремня (поз. 4) и регулируемого ремешка (поз. 5), фиксирующих положение манжеты на руке и препятствующих сползанию манжеты с плеча при движении рукой.

Для использования манжеты:

- установите 2 или 4 виброфона в карманы так, чтобы мембраны прилегали к голубой подкладке, обращенной к телу (рис. 2);
- пристегните ремень (поз. 3) к ремню (поз. 1) и наденьте манжету на плечо мембранами к телу таким образом, чтобы регулировка ремня оказалась со стороны груди;
- отрегулируйте и застегните второй конец эластичного ремня со стороны груди, как показано на рис. 3. Для плотного прижатия виброфонов ремень должен растянуться на 3 – 5 см;

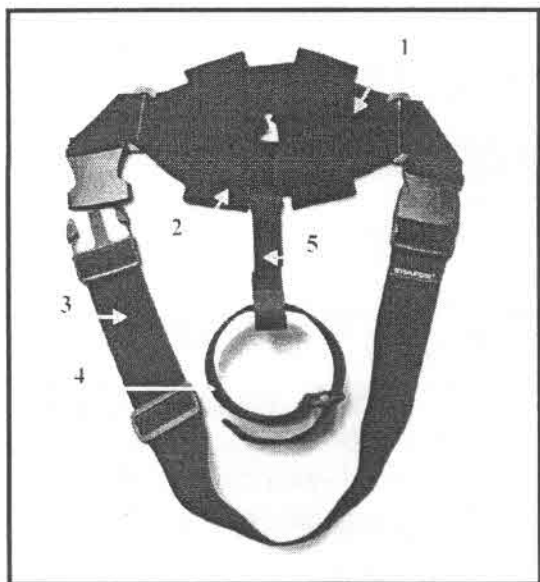


Рис. 1. Общий вид

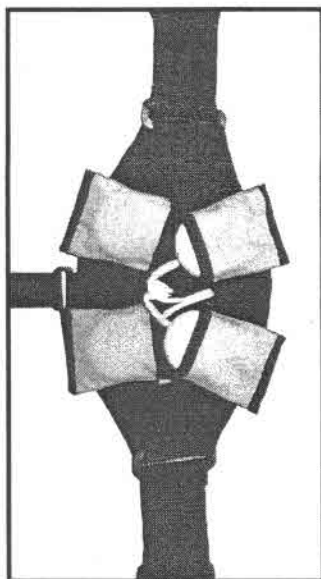


Рис. 2. Установка виброфонов

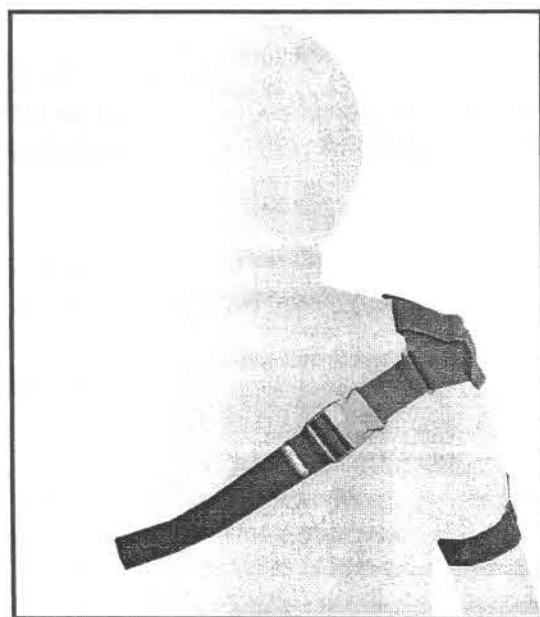


Рис. 3. Фиксация манжеты на теле

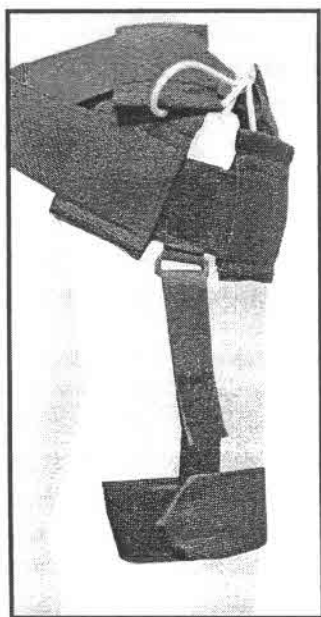


Рис. 4. Фиксация манжеты на руке

- один конец ремешка (поз. 5, рис.1) закрепите между кармашками с виброфонами (рис. 1 и 4). Зафиксируйте свободно малый ремень (поз.4, рис.1) на руке в непосредственной близости от локтевого сустава (рис.4). Отрегулируйте длину ремешка и натяжение малого ремня так, чтобы они удерживали карманы с виброфонами в неизменном положении при движении руки и зафиксируйте второй конец ремешка на малом ремне.

- убедитесь, что манжета плотно прилегает к телу и не сползает.

Уход за изделием:

- стирать при температуре не более 40оС;
- ручная стирка;
- сушить на горизонтальной поверхности;
- не использовать отбеливатель;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- не гладить утюгом;
- не выкручивать;
- **запрещена эксплуатация влажного изделия.**

Гарантийные обязательства:

- гарантийный срок использования 6 месяцев со дня продажи;
- срок службы не менее 1 года.

При покупке изделия требуйте:

- проверки целостности упаковки.

В комплект поставки входят:

Манжета фиксирующая 1* шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Потребительская тара с цветным вкладышем 1 шт.

* Манжета поставляется в разобранном виде