

Уход за изделием:

- стирать при температуре не более 40°C;
- ручная стирка;
- сушить на горизонтальной поверхности;
- не использовать отбеливатель;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- не гладить утюгом;
- не выкручивать;
- **запрещена эксплуатация влажного изделия.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Манжета фиксирующая «Пояснично-грудная» изготовлена в соответствии с действующей технической документацией (ТО 8157-002-33159359) и признана годной для эксплуатации.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

ООО «ВИТАФОН» 198097, г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, 23
Телефоны: (812) 783-3602, 747-2648

e-mail: <info@vitafon.ru>
www.vitafon.ru
www.vsegdazdorov.ru

Дата выпуска _____	Дата продажи _____
	Штамп предприятия торговли
Штамп ОТК	
	Подпись

МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ
«ПОЯСНИЧНО-ГРУДНАЯ»
СО СДВОЕННЫМ ВИБРОФОНОМ

для аппарата виброакустического воздействия
«Витафон-5»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манжета предназначена для индивидуального использования и применяется для фиксации виброфонов аппарата «Витафон-5» при лечении грыжи межпозвоночного диска. Манжета изготовлена из тонкой смесовой ткани медицинского назначения (35% хлопок, 65% П/Э) и фиксирующих широких эластичных лент, образующих карманы для виброфонов.

В комплект поставки входят:


Манжета фиксирующая 1 шт.
Сдвоенный виброфон.....1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Потребительская тара..... 1 шт.

Гарантийные обязательства:

- гарантийный срок использования 6 месяцев со дня продажи;
- срок службы не менее 1 года.

Установка виброфонов при лечении грыжи межпозвоночного диска


Две пары виброфонов с белой маркировкой устанавливаются в карманы под эластичные ленты мембранами к тонкой смесовой ткани согласно рис. 1.

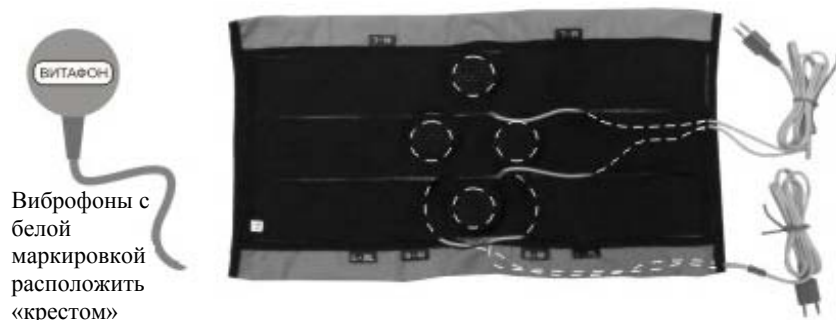

Виброфоны с белой маркировкой расположить «крестом»

Рис. 1

При лечении грыжи межпозвоночного диска в области поясницы, манжета может использоваться для установки трех пар виброфонов. В этом случае две пары виброфонов (с белыми этикетками) устанавливаются вокруг области грыжи, как показано на рис.1. Третья пара виброфонов (с зелеными этикетками) устанавливается на область почек (точки «К») в карманы, как показано на рис. 2.

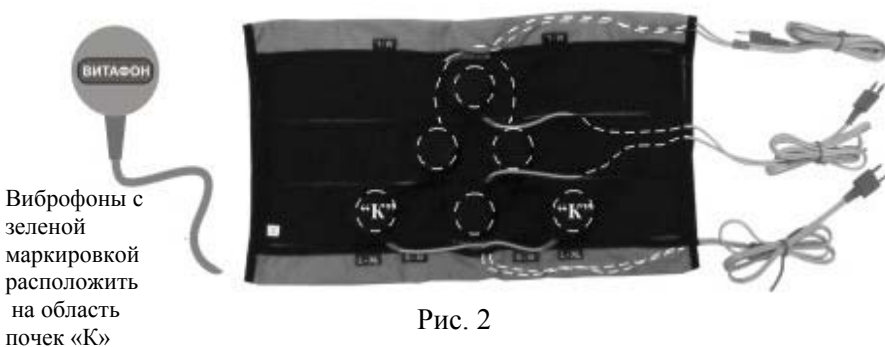

Виброфоны с зеленой маркировкой расположить на область почек «К»

Рис. 2

Внимание! При постоянном использовании шнуры виброфонов могут быть спрятаны согласно пунктирным линиям.

Выбор маркировки карманов (S-M, M-L, L-XL) для установки виброфонов на область «К»

Необходимо измерить фактическое расстояние между почками (область «К») размер А, рис.3. Расстояние между центрами маркированных карманов указано на рис.3 Выберите те симметричные карманы с одинаковой маркировкой, которые наиболее точно соответствуют размеру А.

Маркировка	S-M	M-L	L-XL
Размер А	12 см	17 см	20 см

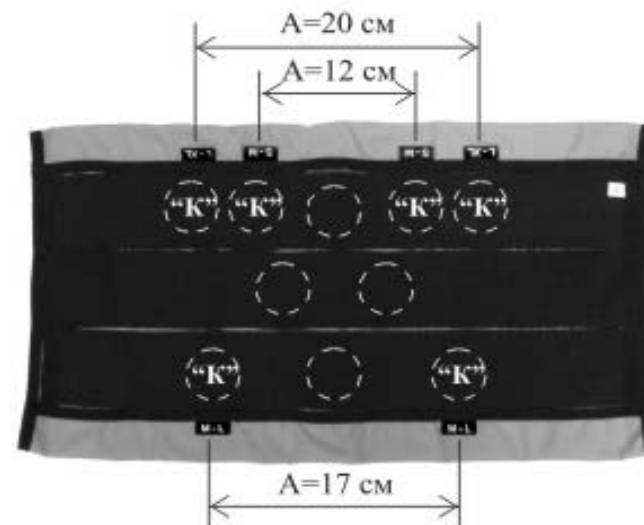


Рис.3

В положении лежа на спине расположить манжету с установленными виброфонами таким образом:

- чтобы все мембраны виброфонов были направлены к телу;
- виброфоны в маркированных карманах оказались в области «К»
- ориентация манжеты должна быть такой, что бы область грыжи оказалась между виброфонами, при этом длинная часть манжеты должна быть перпендикулярна оси позвоночника.